

EPIOS

製品説明・口腔ケア実践セミナーを、定期開催しております。


飛沫感染対策・口腔ケア製品シリーズ「三種の神器」

エピオスは、飛沫感染対策と口腔ケアを 中心に、歯科医療を考えています。


先生方は「飛沫感染対策」と「口腔ケア」に自信がありますか？

■「POIC®ウォーター」はこんな水。

口腔内の汚れ(たんぱく質)の除去を利用しながら、嫌気性菌である歯周病菌を活性酸素で死滅させ、最後に次亜塩素酸(HCLO)に口腔内で変化していく機能水です。

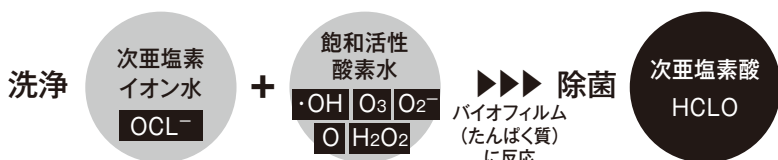

● 次亜塩素酸存在比率とpHの関係

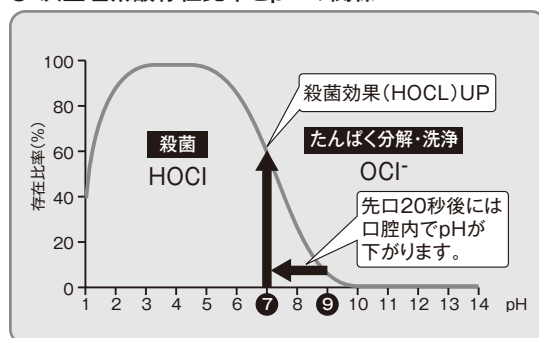

1

新世代型POIC®ウォーター生成器

PLASMA POIC® WATER

たんぱく質、バイオフィルムを分解・洗浄し、除菌までを瞬時にこなします。治療からホームケアまで幅広く利用できます。

- 残留塩素濃度/500ppm (pH9.0~9.5)
- 生成量/電解水、約4L/回
- サイズ/W247×L280×H403mm
- 販売価格(1台)/585,000円(税別)
- 電圧/AC100V (50Hz/60Hz共用)



2

オリゴ糖カルシウム入り
ポリリン酸口腔ジェル

ORALOO 4+ オーラルブフォープラス



歯石の沈着を防ぎ、4つのチカラで大切な歯を守るジェル歯みがきです。

- サイズ/H約155×W約35mm
- 販売価格/3,000円(税別)



■「エピオスエコシステム」とは？

給水ユニット内、ユニット吐水の残留塩素濃度を正確に保ち、衛生的な歯科除菌水で連続殺菌治療を可能にした装置です。生成される水は、高い殺菌力をもつと同時に、安全であることが知られています。

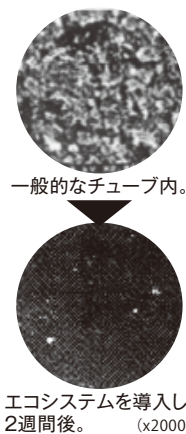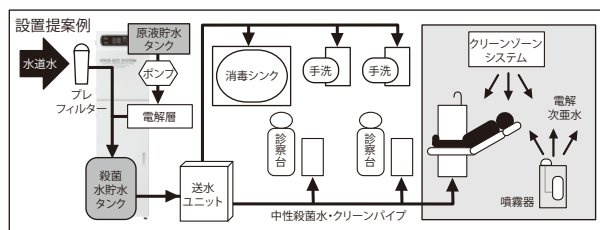

エピオスエコシステムを導入した歯科ユニット水質データ
Water Quality Examination on Dental Offices in Japan

Before EPIOS					After EPIOS Installed				
pH	Bacterial Count (CFU/ml)	meet Water Quality Standard?	RCC (ppm)	Bacterial Count at AWS ₂ (CFU/ml)	pH	Bacterial Count (CFU/ml)	meet Water Quality Standard?	RCC (ppm)	
7.1	>1,000	No	<0.1	7,024	6.8	0	Yes	8	
6.9	>1,000	No	<0.1	10,560	6.4	0	Yes	5	
7.4	>1,000	No	<0.1	2,344	7	0	Yes	4	
6.8	0	Yes	<0.1	4,570	5.8	0	Yes	5	
7.1	0	Yes	<0.1	12,800	6.7	0	Yes	5	
7.4	>1,000	No	<0.1	6,171	6.4	0	Yes	10	
6.9	>1,000	No	<0.1	2,904	6.3	0	Yes	10	
6.6	>1,000	No	<0.1	6,920	6.3	0	Yes	3	

※1:残留塩素濃度 ※2:エアウォーターシリンジ

3


残留塩素濃度補正システム

エピオス エコシステム

高い除菌力を持っている電解機能水を、連続的に末端まで供給するシステム。

- 残留塩素濃度/1~30ppm (pH6.3~6.8)
- サイズ/W400×L300×H1450mm

ユニット3台の場合(一例)
2,680,000円(税別)
(チューブ交換工事・床下配管工事一式含む)
※ただし、病院現状により異なります。

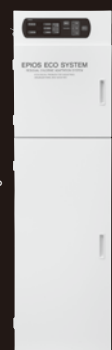

お問い合わせ先

製造販売元

株式会社 エピオス 〒135-0047 東京都江東区富岡1-26-15 飯田ビル3F

フリーダイヤル
(全国通話料無料)



0120-65-6166

